

Открывая новое измерение звука:

Наше портфолио продукции binax

Обеспечьте клиентов binax следующим поколением BestSound Technology. Теперь доступны все типы - аппараты с выносным ресивером, заушные и внутриушные - во всех технологических уровнях 7bx, 5bx и 3bx. Наша исключительная технология предлагает самый естественный бинауральный звук и подходит практически для всех степеней потери слуха и предпочтений клиентов.

Новые модели Motion binax превосходно подходят пациентам, которым необходимо полностью функциональное и легкое в использовании решение. Полностью обновленные Motion SX binax™ с функцией подзарядки и Motion SA binax™ с прямым аудиовходом реализованы в новом гладком корпусе для комфортного и незаметного ношения аппарата за ухом. В комбинации с новой ThinTube, они предлагают превосходное направленное прослушивание. Дополняя семейство, перезаряжаемый, надежный Motion PX binax™ обеспечивает высокий уровень усиления для покрытия практически любой степени тугоухости.

Впервые в мире: Insio binax предлагает бинауральную направленность даже в аппаратах с одним микрофоном. Благодаря бинауральной направленности OneMic, теперь впервые возможно обеспечить направленность с парой практически невидимых слуховых аппаратов. Плюс ко всему, модели Insio дистанционно управляются через touchControl App.

В комбинации с широким спектром высокотехнологичных аксессуаров все аппараты binax предлагают превосходный уровень комфорта, свободы и разнообразия.

Откройте исключительное портфолио binax и приготовьтесь к новому миру возможностей слуховых аппаратов!



Новые Motion SX и SA binax.

Изящный и простой в управлении с бинауральными возможностями.

Направленные микрофоны

2

New! ThinTube

3

4

Беспроводная связь

5

Контактная группа

Motion SX binax

1

e2e wireless 3.0

6

Тиннитус-маскер

7

Дистанционное управление

8

Опция: батарейный отсек с прямым аудиовходом (DAI)⁴

Motion SA binax

Motion SA binax

Опция прямого аудиовхода

Технологические уровни


7bx 5bx 3bx

Motion SX binax
Действительный
размер в см

Совершенно новые Motion SX и Motion SA binax представлены в изящном, инновационном корпусе. Это делает их не только ультракомфортными и незаметными при ношении, но они также предлагают улучшенную направленность. Надежные и легкие в управлении: Motion SX binax может использовать

аккумуляторы, а Motion SA binax с прямым аудиовходом, полностью оснащены для предоставления по-настоящему бинауральных возможностей и обладают всеми опциями для удовлетворения самых требовательных пациентов. Плюс ко всему, в комбинации с easyTek и другими аксессуарами, изменение программ, регулировка громкости или аудиостриминга теперь еще более удобно и понятно.

Доступные цвета:

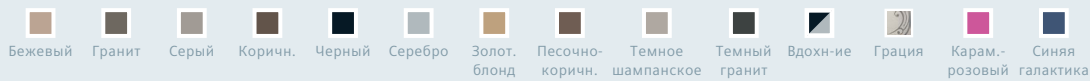

Только для моделей Motion SA binax

Обзор Motion SX/SA binaх.

1 e2e wireless 3.0

Третье поколение беспроводной системы передачи данных - то, что обеспечивает передовые бинауральные возможности binaх.

2 Направленные микрофоны

Оптимизированное расположение компонентов в новом корпусе и ориентация обеспечивают наилучшее бинауральное звучание.

3 ThinTube

Ультратонкая, гибкая и незаметная, надежная трубка ThinTube обеспечивает превосходную направленность и максимум комфорта при ношении.

4 Беспроводная связь

Простой аудиостриминг и дистанционное управление с помощью easyTek и easyTek App.

5 Контактная группа³

eCharger заряжает и высушивает Motion SX binaх в течение ночи.

6 Тиннитус-маскер

Два программируемых режима: только тиннитус терапия или смешанный режим.

7 Дистанционное управление


Программы Motion binaх, громкость, низкие и высокие частоты могут быть с легкостью изменены через touchControl App.

8 Опция: батарейный отсек с прямым аудиовходом (DAI)⁴

1 Доступно только для моделей Motion SX binaх.


2 Доступно только для моделей Motion SA binaх.

ThinTube

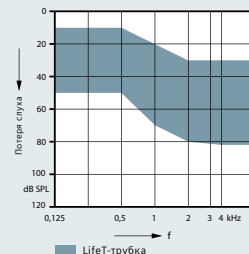

ThinTube
53/125 дБ

Рожок

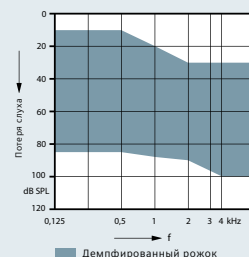

Рожок
60/130 дБ

➤Акустическое соединение

Новая ThinTube идеально сочетается с новым корпусом Motion SX и Motion SA binaх. Для надежной фиксации, удобства и улучшенного направленного звучания она с легкостью выкручивается и закручивается обратно.



Новый Motion PX binax.

Мощный, легкий в управлении с настоящими бинауральными возможностями.



Технологические уровни

7bx

5bx

3bx

Motion PX binax
Действительный
размер в см

Мощный помощник в проверенном дизайне: благодаря широкому выбору настроек Motion PX binax способен покрыть широкий спектр потери слуха и обеспечить превосходное направленное звучание. Удобные оперативные регуляторы и дружелюбный интерфейс обеспечивают легкость в управлении

аппаратом.

Оснащенный непревзойденной технологией binax, Motion PX binax также обеспечивает превосходное бинауральное звучание. В комбинации с easyTek Motion PX binax предлагает пациентам еще больший уровень комфорта.

Доступные цвета:



Бежевый



Гранит



Серый



Коричневый



Черный



Серебристый



Жемчужно-
белый



Золотистый
блонд



Песочно-
коричневый



Темное
шампанское



Темный
гранит

Обзор Motion PX binax.

1 e2e wireless 3.0

Третье поколение беспроводной системы передачи данных - то, что обеспечивает передовые бинауральные возможности binax.

2 Направленные микрофоны

Оптимизированное расположение и ориентация обеспечивают наилучшее бинауральное звучание.

3 Контактная группа

eCharger заряжает и высушивает Motion PX binax в течение ночи.

4 Беспроводная связь



Простой аудиостриминг и дистанционное управление с помощью easyTek и easyTek App.

5 Тиннитус-маскер

Два программируемых режима: только тиннитус терапия или смешанный режим.

6 Дистанционное управление




Программы Motion PX binax, громкость, низкие и высокие частоты могут быть с легкостью изменены через touchControl App.

7 Оперативные регуляторы


Кнопка переключения программ и кулисный регулятор на одном слуховом аппарате для быстрой и легкой смены программ и регулировки громкости.

трубка S-LifeTube

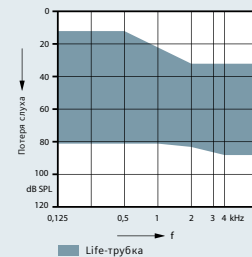

S-LifeTube
65/127 дБ

Рожок

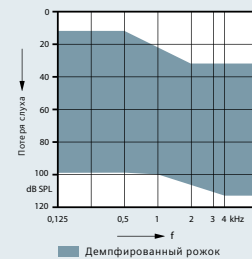

Рожок
75/136 дБ

➤ Акустическое соединение

Оптимальное усиление и высокий уровень комфорта при ношении: S-LifeTube и акриловые вкладыши, созданные для Motion PX binax.



S-LifeTube



Skeleton



Half shell, caved



Full shell, caved



Tube holder

Функции binax		Технологические уровни		
		7bx	5bx	3bx
Информация		Информация		
Обработка сигнала	Каналы	48	32	24
Усиление/ВУЗД	Ручные регуляторы в Connexx	20	16	12
Программы	Кол-во максимально доступных	6	6	6
touchControl App	Только для устройств iOS и Android	●	●	●
binaxFocus				
Направленность	Разрешение по каналам	48	32	24
Бинауральная направленность OneMic ⁷	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●●●●●	–	–
Узкая направленность ^{6,8}	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●●●●●	●●●●○	●●●●○
Направленные микрофоны ⁸		●●●●●	●●●●○	●●●●○
Пространственный SpeechFocus ^{6,8}	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●●●●●	–	–
SpeechFocus		●●●●○	●●●●○	–
TruEar™	Для заушных и RIC слуховых аппаратов	●●●●●	●●●●○	●●●●○
Частотная компрессия		●	●	●
binaxSound				
бинауральный eWindScreen ^{6,8}	Билатеральная настройка и e2e wireless 3.0	●	–	–
eWindScreen	Кол-во шагов настройки	3	3	1
Расширенная полоса пропускания		●	–	–
Адаптивная регулировка стримнга ⁹	При стриминге, easyTek, e2e wireless 3.0	●	–	–
SoundBrilliance™ ⁶	При стриминге, easyTek, e2e wireless 3.0	●	●	–
Подавление обратной связи		●	●	●
Шумоподавление	Разрешение по каналам	48	32	24
	Объединенные шаги настройки	5	5	3
Направленное выделение речи ⁸	Индивидуальные шаги настройки	3	1	–
SoundSmoothing™	Индивидуальные шаги настройки	3	3	1
Менеджер Речи и Шума	Индивидуальные шаги настройки	7	5	3
binaxGuide				
Sound equalizer	Количество классов	6	3	–
Data logging		●	●	●
Learning	Количество классов	6	3	1
Автоматическая Акклиматизация		●	●	●
binax fit		●	●	●
Пространственный конфигуратор ^{6,8}	Req. bilateral fitting & e2e wireless 3.0	●	●	–
Диапазон	easyTek и easyTek App или кулис. переключ.	●	●	–
Направленность	easyTek и easyTek App	●	●	–
Тиннитус-маскер				
Статич. терапевтические сигналы	Ручные регуляторы в Connexx	20	16	12
Сигналы "Океанские Волны"		●	●	●

⁶ Кроме Ace binax.

⁷ Только для СА с одним микрофоном каждый.

⁸ Только для СА с двумя микрофонами каждый.